


Oxy₂Mask™ – Eine Maske, viele Anwendungen

Dank leichtem und offenem Design ist Oxy₂Mask™ ein hocheffizientes Maskensystem. Die innovative Sauerstoffmaske ersetzt mehrere konventionelle Produkte in der Sauerstofftherapie, kommt sie doch gänzlich ohne Ventile und Reservoirs aus.

Mehr Sicherheit. Mehr Tragekomfort.


- Verringert das Risiko einer CO₂-Rückatmung
- Reduziert die Gefahr der Aspiration von Erbrochenem
- Für Nasen- und Mundatmung
- Kein Wärme- oder Feuchtigkeitsstau unter der Maske
- Reduziert das Gefühl der Klaustrophobie
- Ermöglicht uneingeschränkte Kommunikation sowie das orale Verabreichen von Flüssigkeiten
- Für Babys, Kinder und Erwachsene
- Endoskopische Zugänge möglich
- Konnektor ist 360° drehbar

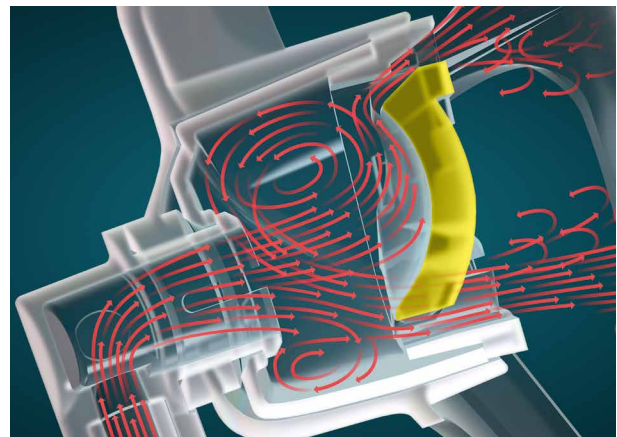

Verbesserte Flow-Technologie für mehr Dynamik des Diffusors

Vier aerodynamische Diffusoröffnungen leiten den Sauerstoff mit erhöhter Geschwindigkeit gezielt zu Nase und Mund. Dadurch entsteht eine Wolke aus Sauerstoffmolekülen. Das neue Design maximiert das Potenzial der dem Patienten zugeführten Sauerstoffwirbel.

Oxy₂Mask™ vs. herkömmliche Produkte

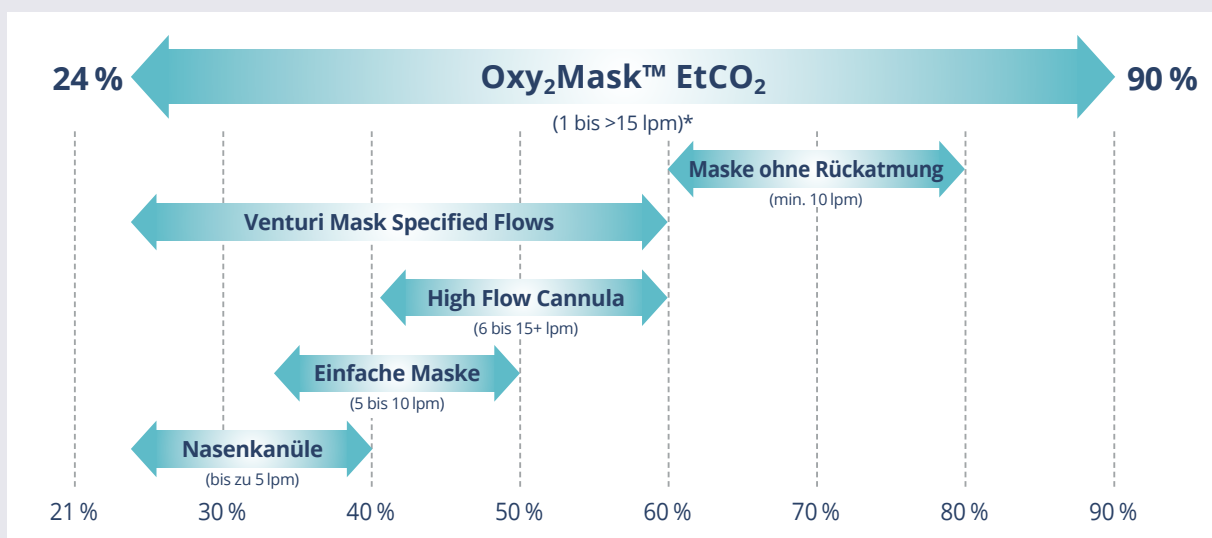

Das patentierte Design der Oxy₂Mask™ gibt es in vier Größen:



Oxy₂Mask™ Adult
liefert Flussraten
von 1 bis 15 Liter
pro Minute
plus Flush bei einem
FiO₂ von 24 % bis 90 %.

Oxy₂Mask™ Plus
die um 25 % größere
Maske liefert idente
Flussraten wie
Oxy₂Mask™ Adult

Oxy₂Mask™ Kid
für Kinder von 3 bis
10 Jahren: liefert
Sauerstoffflüsse
von 1 bis 15+ Liter
pro Minute – bündig,
24 % bis 90 % FiO₂

Oxy₂Mask™ Tyke
für Kinder von
6 Monaten bis 3 Jahre:
liefert Sauerstoffflüsse
von ¼ bis 5+ Liter
pro Minute,
22 % bis 65 % FiO₂

BESTELLINFORMATIONEN		
ARTIKEL	VPE	ART. NR.
Oxy ₂ Mask™ Adult	25 Stk.	SM-OM-1125-8
Oxy ₂ Mask™ Plus	25 Stk.	SM-OP-1125-8
Oxy ₂ Mask™ Kid	25 Stk.	SM-OK-1125-8
Oxy ₂ Mask™ Tyke	25 Stk.	SM-OT-1125-8

